

Link do produktu: <https://5elementum.eu/tejpy-5e-bawelniane-speed-czerwone-p-14.html>



## Taśma kinezyjologiczna Bawełniana (SPEED) - czerwona

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena         | <b>20,00 zł</b>      |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>     |
| Kod EAN      | <b>5905108022242</b> |

### Opis produktu

#### Tejpy 5e Bawełniane SPEED w kolorze czerwonym – Klasyczne wsparcie na co dzień


Szukasz sprawdzonego, naturalnego rozwiązania, które wesprze Twój układ ruchu w codziennych aktywnościach?

**Tejpy 5e bawełniane SPEED** to nasz flagowy, klasyczny wyrób medyczny. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które cenią sobie komfort, oddychalność materiału i delikatność dla skóry.

To idealny wybór do standardowych aplikacji, zarówno dla pacjentów gabinetów fizjoterapeutycznych, jak i do użytku domowego. Poznaj taśmę, która naśladuje właściwości ludzkiej skóry i zapewnia mechaniczne wsparcie dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

#### **Komfort noszenia - jak długo taśma zostaje na ciele?**



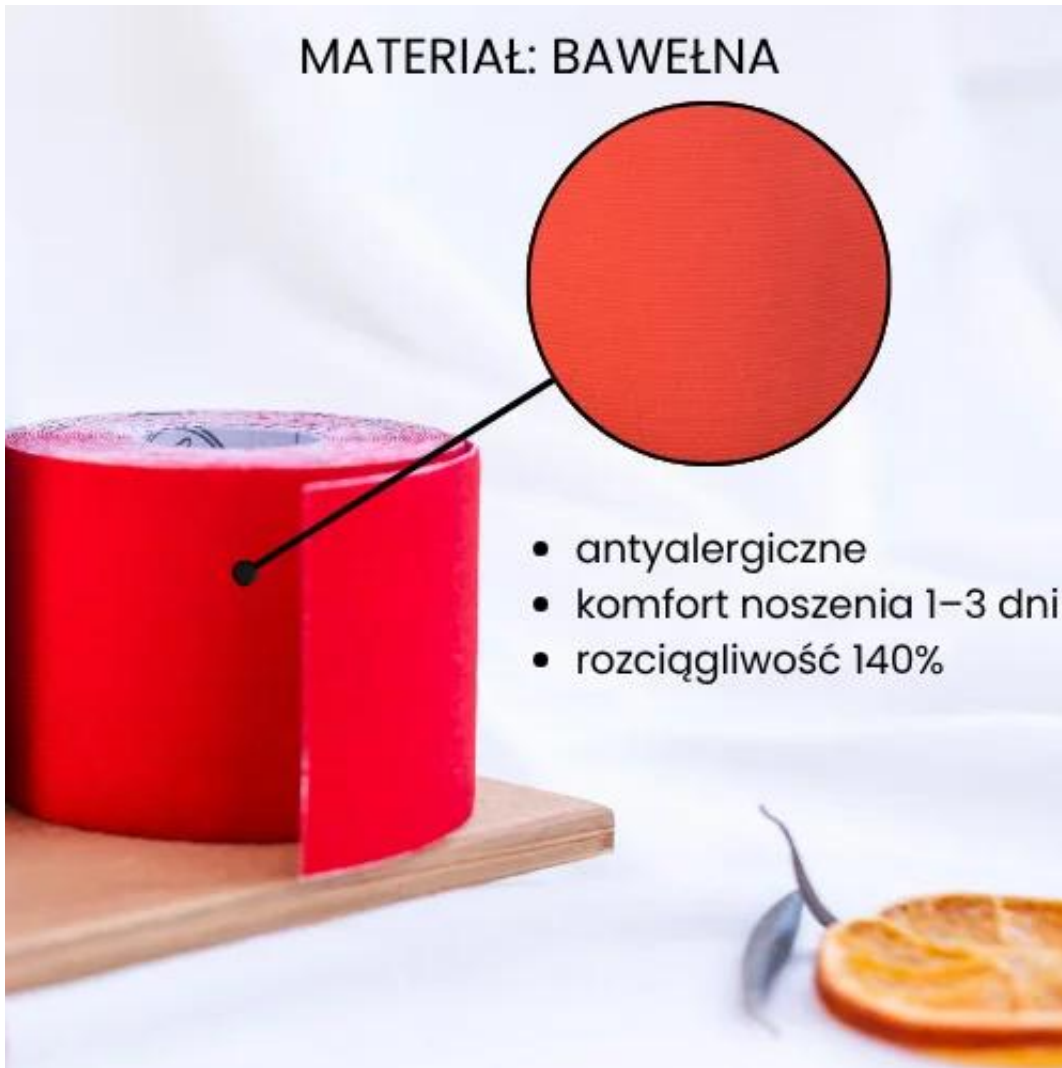


Wybierając **tejpy 5e z bawełny**, decydujesz się na produkt przeznaczony do codziennego wsparcia. Dzięki wysokiej jakości splotu i bezpiecznemu klejowi, **komfort noszenia wynosi od 1 do 3 dni**. To optymalny czas, w którym materiał zachowuje swoje właściwości wspierające, nie obciążając przy tym nadmiernie naskórka.

### **Tejpy 5e Bawełniane SPEED w kolorze czerwonym - Klasyczne wsparcie na co dzień**

Szukasz sprawdzonego, naturalnego rozwiązania, które wesprze Twój układ ruchu w codziennych aktywnościach? **Tejpy 5e bawełniane SPEED** to nasz flagowy, klasyczny wyrób medyczny. Stworzyliśmy go z myślą o osobach, które cenią sobie komfort, oddychalność materiału i delikatność dla skóry.

To idealny wybór do standardowych aplikacji, zarówno dla pacjentów gabinetów fizjoterapeutycznych, jak i do użytku domowego. Poznaj taśmę, która naśladuje właściwości ludzkiej skóry i zapewnia mechaniczne wsparcie dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.



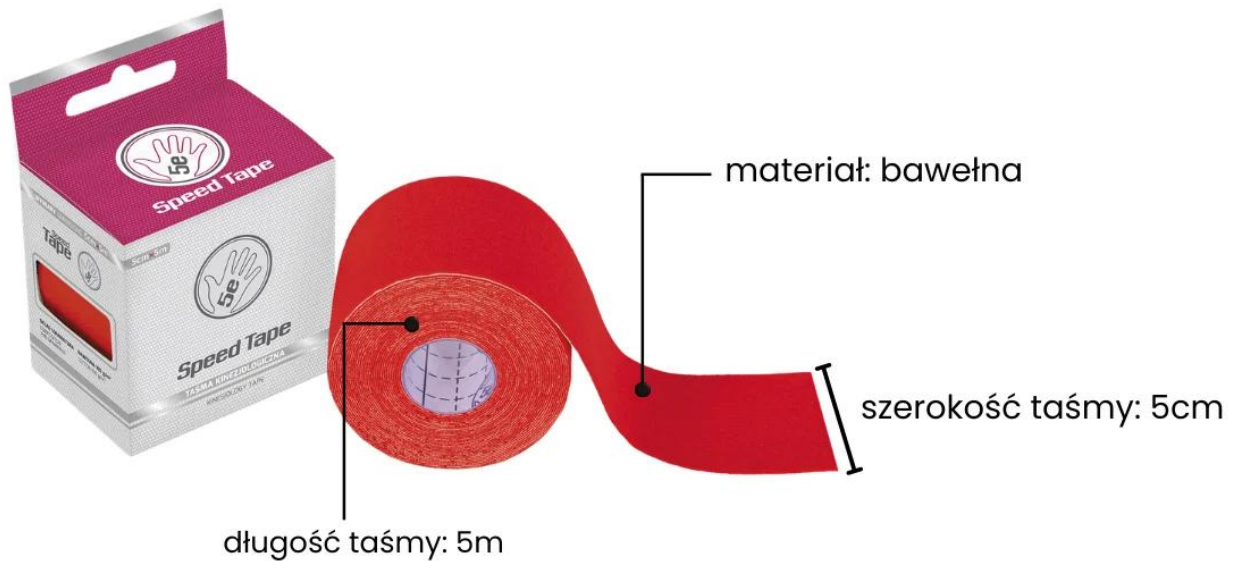

| Parametr     | Opis                           |
|--------------|--------------------------------|
| Seria        | SPEED TAPE (Klasyczna Bawełna) |
| Kolor        | Niebieski                      |
| Materiał     | 100% Bawełna klasy Premium     |
| Elastyczność | do 140%                        |
| Klej         | Medyczny akryl (bezlakosowy)   |
| Wymiary      | 5 cm x 5 m (rolka standardowa) |

### Co wyróżnia plastry bawełniane SPEED?

Każda rolka z serii SPEED została zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalny balans między elastycznością a trwałością. Zamiast syntetycznych zamienników, postawiliśmy na klasykę, która sprawdza się od lat. Co dokładnie znajdziesz w tym produkcie?





**Hipoalergiczny klej:** Akrylowe spoiwo jest delikatne dla naskórka i minimalizuje ryzyko wystąpienia podrażnień. Produkt jest antyalergiczny i nie zawiera lateksu.


**Linie faliste:** Klej nie jest nałożony jednolicie. Falisty wzór sprawia, że taśma mechanicznie unosi naskórek. Zwiększa to przestrzeń między tkankami, co w fizjoterapii wykorzystuje się do wspomagania mikrokrążenia.

**Materiał: Bawełna.** Naturalna tkanina zapewnia doskonałą przepuszczalność powietrza, dzięki czemu skóra pod plastrem może swobodnie oddychać.

**Rozciągliwość 140%.** To nie jest przypadkowa wartość. Elastyczność taśmy na poziomie 140% jest zbliżona do naturalnej elastyczności ludzkiej skóry, co pozwala na pełen zakres ruchu.

## Precyzyjne docinanie dzięki siatce na podkładzie



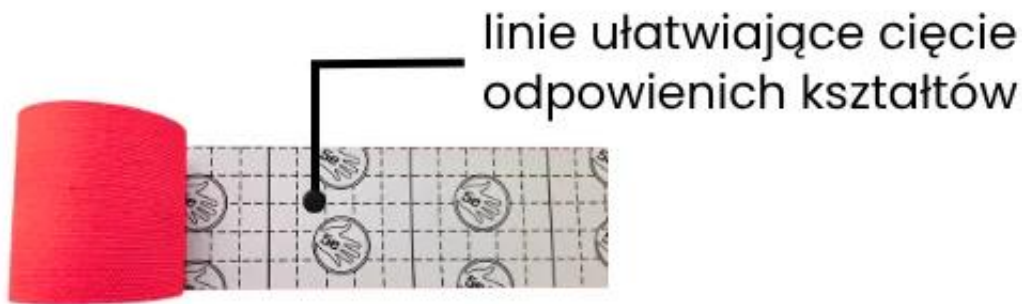

Przygotowanie odpowiedniej aplikacji wymaga precyzji. Aby ułatwić Ci pracę, na papierze zabezpieczającym umieściliśmy praktyczną siatkę z logo 5e. Równe **linie ułatwiające cięcie** pomogą Ci szybko i dokładnie odmierzyć pożądaną długość materiału.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz klasycznego paska (kształt "I"), rozwidlenia (kształt "Y" lub "X"), czy skomplikowanego wachlarza do aplikacji limfatycznych – siatka na podkładzie gwarantuje równe krawędzie i oszczędność materiału przy każdym cięciu.



Certyfikaty:

Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE

Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I





TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

Czytaj więcej

## Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

### Przewidziane Zastosowanie:

Taśmy kinezyologiczne to wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania układu ruchu i naturalnych procesów regeneracyjnych poprzez mechaniczne działanie na tkanki. Stosuje się je wspomagająco w przypadku:

- łagodzenia dolegliwości bólowych narządu ruchu,
- redukcji obrzęków i zastoju limfatycznych,
- stabilizacji stawów (m.in. po urazach, nacignięciach i skręceniach),
- łagodzenia objawów towarzyszących chorobom zwyrodnieniowym oraz dysfunkcjom układu krwionośnego i limfatycznego.

### Zalety metody kinesiotapingu:

- szerokie i wielorakie zastosowanie wspomagające układ mięśniowo-szkieletowy,
- działanie oparte na właściwościach mechanicznych – metoda wolna od substancji farmakologicznych (nie obciąża układu pokarmowego),
- wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu po urazach,
- może przyczynić się do zwiększenia zakresu ruchu w stawie,
- zapobieganie przeciwnom i wsparcie w profilaktyce kontuzji,
- możliwość stosowania u dorosłych oraz u dzieci (wyłącznie po instruktażu specjalisty),
- możliwość samodzielnej aplikacji w warunkach domowych (zalecane po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeutą),
- długi okres użytkowania (pojedyncza aplikacja może utrzymywać się na skórze przez kilka dni).

### Przeciwwskazania:

Wyrobu bezwzględnie nie należy stosować na otwarte rany, zdrapania, pęcherze, oparzenia słoneczne, skórę objętą aktywną infekcją, stanem zapalnym lub owrzodzeniem. Nie stosować przy stwierdzonej zakrzepicy żył.



głębokich oraz w przypadku znanej nadwrażliwości / alergii na klej poliakrylowy.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia w miejscu aplikacji silnego zaczerwienienia, pieczenia, uporczywego swędzenia lub pęcherzy (odczyny alergiczne lub mechaniczne uszkodzenie skóry), należy natychmiast usunąć taśmę i przemyć skórę. Jeżeli objawy nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem. Próba ponownego użycia tej samej taśmy po jej odklejeniu jest nieskuteczna (utrata właściwości adhezyjnych kleju) i stwarza ryzyko infekcji.

## Zgłaszanie incydentów:

Každy poważny incydent, jaki wystąpi w związku z niniejszym wyrobem, należy zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz właściwemu organowi nadzorczemu. W Polsce jest to Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

## Instrukcja użytkowania

### Aplikacja i usuwanie:

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odświeżona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięcia (0%). Nacięcie czyszczonej rodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

