

Link do produktu: <https://5elementum.eu/bandaze-kohezyjne-5e-max-niebieskie-p-31.html>



Bandaż Kohezyjny 5E Max 7.5cm x 4.5m - Niebieski

Cena	4,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5905108022204

Opis produktu

Większy wymiar, totalna ochrona. Wybór profesjonalistów bez kompromisów.


Odkryj **Bandaż Kohezyjny 5E w kolorze intensywnego błękitu** - Twój fundament w profilaktyce i regeneracji. Wersja o szerokości **7,5 cm** została zaprojektowana, aby skutecznie stabilizować większe partie ciała, gdzie standardowy bandaż to za mało. Niebieski kolor to symbol higieny i nowoczesnego podejścia do opieki medycznej, najczęściej wybierany przez fizjoterapeutów sportowych.

Co sprawia, że seria MAX 5E jest wyjątkowa?

- **Formuła Hipoalergiczna:** Ten bandaż został stworzony z myślą o alergikach. Nie zawiera lateksu, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny nawet dla najbardziej reaktywnej i wrażliwej skóry.
- **Kohezja Inteligentna:** Przylega wyłącznie do siebie. Nie potrzebujesz nożyczek, zapinek ani kleju. Możesz go przerwać rękami dokładnie tam, gdzie kończysz aplikację.
- **Stać Kompresja:** W przeciwieństwie do zwykłych opatrunków, wersja Non-Woven utrzymuje nadany ucisk przez cały czas noszenia. Nie musisz go poprawiać w trakcie dnia.
- **Ekonomia i Komfort:** Jeśli uznasz, że bandaż jest za ciasny, po prostu go odwiń i popraw. Materiał nie traci swoich właściwości przyklepnych, co pozwala na wielokrotną korektę bez marnowania produktu.

Specyfikacja Techniczna (Karta Produktu):



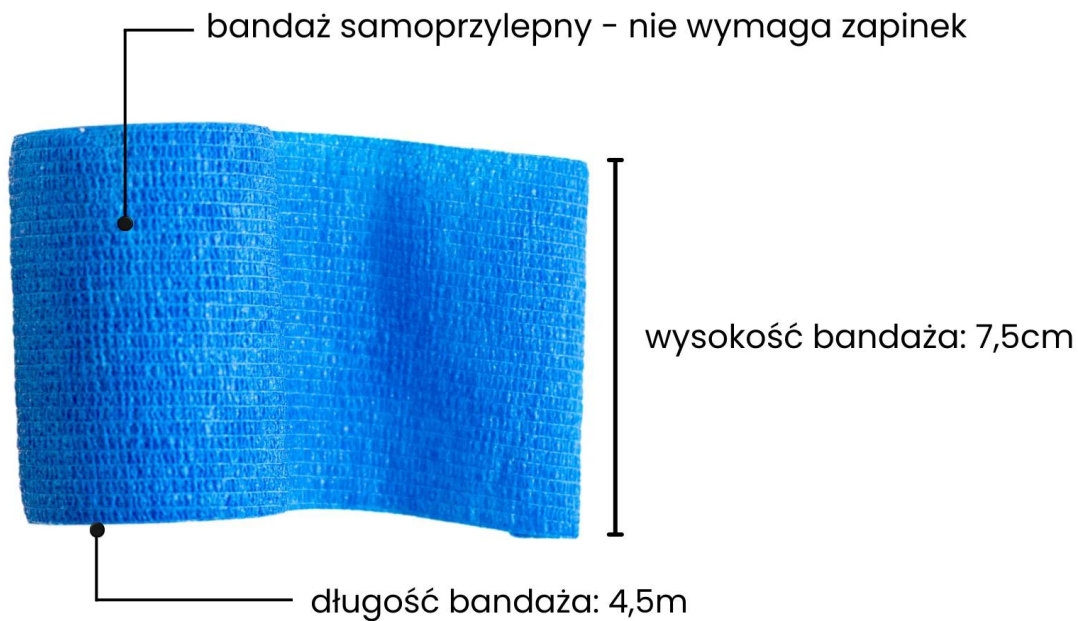

Parametr	Opis
Marka / Seria	5E / Non-Woven Hypoallergenic
Szerokość	7,5 cm (Rozmiar MAX)
Długość	4,5 m
Materiał	Miękka włóknina (hezlateksowa)
Gramatura	30 g/m ²
Cechy szczególne	Hipoalergiczny, oddychający

Certyfikaty:



Conformité Européenne - Certyfikaty zgodności CE



Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych - Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I



TÜV SÜD - Potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego wyrobów

☐ Przykładowe zastosowania (inspiracje):

- Stabilizacja stawu skokowego u piłkarzy i biegaczy.
- Zabezpieczanie dużych kompresów żelowych (ciepło/zimno) na udzie lub kolanie.
- Podtrzymywanie ochraniaczy i elementów stroju w sportach kontaktowych.



Czytaj więcej

Informacje szczegółowe o użytkowaniu produktu

Przewidziane Zastosowanie (Wskazania):

Bandaż kohezyjny to elastyczna opaska podtrzymująca przeznaczona do stosowania zewnętrznego.

Wyrób stosuje się w celu:

- podtrzymywania i zabezpieczania opatrunków pierwotnych (np. gazików, kompresów) na ranach,
- zapewnienia lekkiej kompresji, stabilizacji oraz wsparcia po urazach układu ruchu, takich jak skręcenia czy nacignięcia mięśni,
- mocowania okładów chłodzących lub grzewczych oraz urządzeń medycznych, takich jak szyny unieruchamiające.

Zalety Wyrobu:

- Posiada właściwości kohezyjne – warstwy bandaża przyklejają się wyraźnie same do siebie (mikrowłókna szepiąją się ze sobą), nie przywierają do skóry, włosów ani odzieży.
- Nie wymaga stosowania dodatkowych zapinek, agrafek ani plastrów mocujących.
- Zapewnia bezbolesne zdejmowanie bez ryzyka wrywania włosów czy uszkodzenia naskórka.
- Przepuszcza powietrze, pozwalając skórze oddychać i zapobiegając jej maceracji.
- Można go łatwo urywać w dłoniach na podłogę (wzdłuż i w poprzek), co ułatwia i przyspiesza aplikację.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, owrzodzenia lub oparzenia. Wyrób jest niejałowy i bezwzględnie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia rany sterylnym opatrunkiem.
- [Zostaw ten punkt tylko, jeżeli dany model posiada lateks]: Wyrób zawiera naturalny kauczuk (lateks). Nie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością lub alergią na ten składnik.

Ostrzeżenia i Środki Ostrożności:

- Bandaż nie należy owijać zbyt ciasno, aby nie upośledzić krążenia krwi i nie spowodować ucisku nerwów.
- Należy regularnie kontrolować ukrwienie kończyny poniżej założonego opatrunku. W przypadku pojawienia się drętwienia, mrowienia, bólu, zziębnięcia, zasinienia skóry lub narastającego obrzęku, należy natychmiast zdjąć lub poluzować bandaż.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub utrzymywania się objawów niepożądanych, skonsultuj się z personelem medycznym.



Zgodnie z wymogami prawa, każdy poważny incydent związany z wyrobem należy niezwłocznie zgłosić Producentowi, Dystrybutorowi (5E) oraz Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w Polsce.

Instrukcja użytkowania

(Aplikacja i usuwanie):

1. Przygotowanie: Skóra przed aplikacją musi być czysta, odtuszczona (np. przemyta alkoholem) i całkowicie sucha. Głębokie owłosienie należy usunąć, aby zapewnić trwałość aplikacji i zminimalizować ból przy ściąganiu plastra.
2. Aplikacja: Odmierz odpowiednią długość taśmy i zaokrąglij jej rogi (zapobiega to strzępieniu się krawędzi). Końce taśmy (tzw. bazy, około 3-5 cm) zawsze naklejaj bez żadnego nacięgu (0%). Naciąg czyszczyrodkowej dostosuj do rodzaju urazu. Laikom zaleca się wykonanie pierwszej aplikacji pod okiem specjalisty.
3. Aktywacja: Po nałożeniu potrzyj energicznie powierzchnię taśmy dłońmi, aby wytworzone ciepło aktywowało hipoalergiczny klej akrylowy. Unikaj kontaktu taśmy z wodą przez 1 godzinę od aplikacji.
4. Zdejmowanie: Zdejmuj plaster bardzo powoli, rolując go blisko skóry w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów. W celu ułatwienia procesu można wcześniej naszczyć taśmę oliwką kosmetyczną (na 15 minut przed demontażem). Nie zrywaj taśmy gwałtownie.

